



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10314



No:200027413

委托单位

湖南臻和亦康医疗用品有限公司
地址：湖南省湘潭市高新区双马街道霞光东
间6栋

医用外科口罩 40个
颜色：兰色
材质：无纺布+熔喷布

TEST REPORT 检验检测报告



广州检验检测认证集团有限公司
Guangzhou Inspection Testing and Certification Group Co., Ltd.
广州广检纺织服装服饰检测研究院有限公司
Guangzhou Guangjian Textile Garment and Accessories Testing and Research Institute Co., Ltd.
国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)
National Quality Inspection and Testing Center for Textile Garment and Accessories(Guangzhou)
国家皮革制品质量检验中心(广东)
National Quality Inspection and Testing Center for Leather Products (Guangdong)

检验检测报告



No: 200027413

防伪查询网址: www.gttc.net.cn

防伪码: SFTT-7846-54


共3页 第1页



委托单位	湖南臻和亦康医疗用品有限公司 地址: 湖南省湘潭市高新区双马街道霞光东路55号湖南湘江节能科技园生产装备车间6栋		
客户认定信息	医用外科口罩 40个 颜色: 兰色 材质: 无纺布+熔喷布 号型规格: 耳挂型 100×180mm 允差: ±10% 生产单位: 湖南臻和亦康医疗用品有限公司		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-03-02
		报告签发日期	2020-03-08
判定依据	YY 0469-2011 《医用外科口罩》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	细菌过滤效率	YY 0469-2011	符合
	外观[3个]	YY 0469-2011	符合
	结构与尺寸[3个]	YY 0469-2011	符合
	鼻夹[3个]	YY 0469-2011	符合
	口罩带[3个]	YY 0469-2011	符合
	合成血液穿透	YY 0469-2011	符合
	颗粒过滤效率	YY 0469-2011	符合
	阻燃性能	YY 0469-2011	符合
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		



签发: 方明 工程师

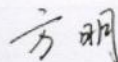

样品图片

No:200027413

共3页 第2页



检验检测报告附页

No:200027413

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●细菌过滤效率 (%)	YY 0469-2011 附录B 测试菌种: 金黄色葡萄球菌ATCC 6538 测试面积: 40cm ² 气体流速: 28.3L/min 平均颗粒直径: 3.0 μm 阳性质控值: 1.9×10 ³ CFU 阴性质控值: <1CFU	≥95	BFE ₁ 99.6 BFE ₂ 99.6 BFE ₃ 99.7	符合	
●外观[3个]	YY 0469-2011 5.1	口罩外观应整洁、形状完好, 表面不得有破损、污渍。	符合要求	符合	
●结构与尺寸 [3个]	YY 0469-2011 5.2	口罩佩戴好后, 应能罩住佩戴者的鼻、口至下颌, 应符合标志的设计尺寸及允差。	结构: 符合要求 尺寸(cm): 长 宽 1# 17.4 9.2 2# 17.3 9.3 3# 17.4 9.3	符合	
●鼻夹[3个]	YY 0469-2011 5.3	口罩上应配有鼻夹, 鼻夹由可塑性材料制成。鼻夹长度应不小于8.0cm。	符合要求	符合	
●口罩带[3个]	YY 0469-2011 5.4	口罩带应佩戴方便。每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N。	符合要求	符合	
●合成血液穿透	YY 0469-2011 5.5 合成血液表面张力:0.042N/m	口罩内侧面不应出现渗透。	未渗透	符合	
●颗粒过滤效率 (%)	YY 0469-2011 5.6.2 气体流量:30L/min 气溶胶颗粒:NaCl 气溶胶浓度:15mg/m ³ 温度:23.1℃ 相对湿度:36.0%	≥30	最小值 93.17	符合	
●阻燃性能(s)	YY 0469-2011 5.8	≤5	1# 0.0 2# 0.0 3# 0.0	符合	
备 注	(本栏空白)				



——本报告结束——